

我们的意愿——

我们因志同道合，
我们会共谋发展；
我们将真诚期待，
您的鼎力加盟——

中国医保商会医用敷料分会 副会长单位

浙江湖州市医疗器械行业协会 副会长单位

医疗品 介绍 Medical description



——联系我们



阿里巴巴1688二维码 淘宝二维码 企业官网二维码

上海华埠电话：+86-21-65878676
上海华埠传真：+86-21-58772807

浙江华埠电话：+86-572-5024859
浙江华埠传真：+86-572-5021188

客服热线：400-070-1198
微信平台号：18905820688
E-mail: hb@86medical.com



阿里巴巴1688二维码 淘宝二维码 企业官网二维码

总 经 销：上海华埠医疗科技有限公司
生产基地：浙江安吉华埠实业有限公司

经营地址：上海市闵行区吴中路1050号第六幢(B幢)905室
生产地址：浙江省安吉县递铺街道龙王溪中路588号1-2幢

Http://www.86medical.com E-mail:hb@86medical.com

客服热线：021-65878676 0572-5024672

免费热线：400-070-1198 微信平台号：18905820688



企业简介

上海华埠医疗科技有限公司 浙江安吉华埠实业有限公司

本集团通过：
GMP、ISO13485体系认证
欧盟产品CE、美国FDA认证
ISO13485全面质量管理体系认证



(生产基地鸟瞰图)

华埠企业扎根中国，面向世界。华埠企业从事和生产经营的核心产业是人类健康医疗产业和相关产品，并围绕这宗旨而展开在各个领域和以各种形式的经济活动。

为此，我们将不分肤色、不分国度、不分贵贱，我们将以“团结、合作、奋进、共赢”的合作理念，结盟当今世界的志同道合者，一起为人类的医疗健康事业和共同富裕的美好人生而齐努力，共发展。

法人代表: 鲁姿含



CONTENTS

1、企业简介 (Company Profile)	00
2、企业资质 (Qualification of Enterprise)	01
3、石膏绷带 (黏胶型) (Plaster of Paris Bandage)	03
4、凡士林纱布片 (Viseline Gauze)	05
5、沸石黏胶绷带 (专利产品) (Z.B bandage-patent produce)	07
6、弹性绷带 (Elastic Bandage)	09
7、自粘绷带 (Self-adhesive Bandage)	11
8、石膏衬垫 (Cast-padding)	13
9、医用高分子夹板 (Polymer bandage-fiber glass)	15
10、玻璃纤维绷带 (Polymer bandage-fiber glass)	17
11、无纺布绷带 (Elastic nonwoven bandage)	19
12、医用胶布 (护理专用) (Infusion care tape)	21
13、一次性防护口罩 (Disposable protective mask)	22
14、一次性医用口罩 (Disposable medical mask)	23
15、精华面膜 (Essence Mask)	24
16、保湿精华液 (Moisture essence)	25
17、产品之星 (Product stars)	26

企业资质

Qualification of Enterprise

1. 公司证件

1. Business Licenses and Certifications



浙江安吉华埠实业有限公司



上海华埠医疗科技有限公司



浙江华埠医疗器械生产许可证




浙江华埠消毒产品卫生许可证



Zhejiang Anji Huabu Industrial Co., Ltd.



Shanghai Huabu Medical Technology Co., Ltd.

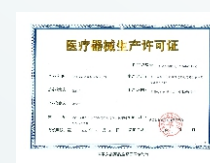

Production License of Medical Equipment in Production Base



Production License of Disinfection Product



ISO9001 证书



ISO9001 证书



ISO9001 证书



ISO13485 证书



ISO13485 证书



ISO9001 Certificate



ISO9001 Certificate



ISO9001 Certificate



ISO13485 Certificate



ISO13485 Certificate



ISO13485 证书



CE 0197 证书



CE 0197 证书



FDA(1) 证书



FDA(2) 证书



ISO13485 Certificate



CE 0197 Certificate



CE 0197 Certificate



FDA(1) Certificate




FDA(2) Certificate

2. 产品专用商标

2. Special Product Trademark



上海华埠经营许可证

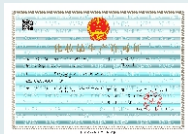

化妆品许可证



网蝶
Net Butterfly



图森
TUSON



Distribution Company License



Cosmetic License



网蝶
Net Butterfly



图森
TUSON



推荐产品



石膏绷带 (粘胶型)

常用规格

6×300cm, 7.5×270cm, 7.5×360cm, 10×360cm, 12.5×360cm, 15×360cm, 7.5×460cm, 10×460cm, 12.5×460cm, 15×460cm, 20×460cm, 6×200cm, 8×200cm, 10×200cm, 12×200cm, 15×200cm, 20×200cm, 5×270cm, 10×270cm, 12×270cm, 12.5×270cm, 15×270cm, 20×270cm, 5×275cm, 7.5×275cm, 10×275cm, 15×275cm, 20×275cm, 5×300cm, 7.5×300cm, 8×300cm, 10×300cm, 12.5×300cm, 15×300cm, 20×300cm, 5×360cm, 7.5×360cm, 12×360cm, 20×360cm, 5×450cm, 7.5×450cm, 10×450cm, 12.5×450cm, 15×450cm, 20×450cm, 5×455cm, 7.5×455cm, 10×455cm, 12.5×455cm, 15×455cm, 20×455cm, 5×460cm, 12×460cm, 5×2000cm, 7.5×2000cm, 10×2000cm, 12×2000cm, 12.5×2000cm, 15×2000cm, 20×2000cm, 5×5000cm, 7.5×5000cm, 10×5000cm, 12×5000cm, 12.5×5000cm, 15×5000cm, 20×5000cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

骨科创面手术配套的医用产品。

使用方法

- 1、浸渍：将一卷产品倾斜45度浸渍入常温水中涉取水分，直至没有连续气泡产生；
- 2、挤压：取出产品，用双手从产品的两端向中间挤压；
- 3、卷绕：将产品均匀的卷绕在患部；
- 4、平整：在实施包扎时，应该边包扎边用手进行塑形、平整。

适用范围

用于骨折畸形固定。

注意事项

- 1、浸渍时，水温一般在20℃-30℃为宜，浸渍时间约在5-15秒；
- 2、一卷产品的卷绕过程须在其固化时间内完成；
- 3、该产品不与伤口直接接触；
- 4、一次性使用，用后销毁；
- 5、保质期：24个月。



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知



Recommend Products



Plaster of Paris Bandage

Specifications

6×300cm, 7.5×270cm, 7.5×360cm, 10×360cm, 12.5×360cm, 15×360cm, 7.5×460cm, 10×460cm, 12.5×460cm, 15×460cm, 20×460cm, 6×200cm, 8×200cm, 10×200cm, 12×200cm, 15×200cm, 20×200cm, 5×270cm, 10×270cm, 12×270cm, 12.5×270cm, 15×270cm, 20×270cm, 5×275cm, 7.5×275cm, 10×275cm, 12.5×275cm, 15×275cm, 20×275cm, 5×300cm, 7.5×300cm, 8×300cm, 10×300cm, 12.5×300cm, 15×300cm, 20×300cm, 5×360cm, 7.5×360cm, 12×360cm, 20×360cm, 5×450cm, 7.5×450cm, 10×450cm, 12.5×450cm, 15×450cm, 20×450cm, 5×455cm, 7.5×455cm, 10×455cm, 12.5×455cm, 15×455cm, 20×455cm, 5×460cm, 12×460cm, 5×2000cm, 7.5×2000cm, 10×2000cm, 12×2000cm, 12.5×2000cm, 15×2000cm, 20×2000cm, 5×5000cm, 7.5×5000cm, 10×5000cm, 12×5000cm, 12.5×5000cm, 15×5000cm, 20×5000cm

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Product Description

Supporting tool for orthopedic wound surgery

Application Scope

Used for fixation of fracture.

Application Method

1. Dipping: At an inclined angle of 45 degrees, dip one roll of products into the water with room temperature, to sip water, until there are no continuous bubbles;
2. Squeezing: Take out the product, and use both hands to squeeze the product from both ends to the middle;
3. Wrapping: Evenly wrap the product around the affected area.
4. Flattening: Flattening by hand at the time of enswathing when enswathing is carried out.

Attentions:


1. This product need to be dipping in the water of 20℃-30℃ about to 5-10 seconds.
2. The wrapping process on one roll of products shall be completed before the curing
3. This product is not in direct contact with the wound.
4. This product is disposable, and it shall be destroyed after being used.
5. Valid Period: 2 years



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知



推荐产品

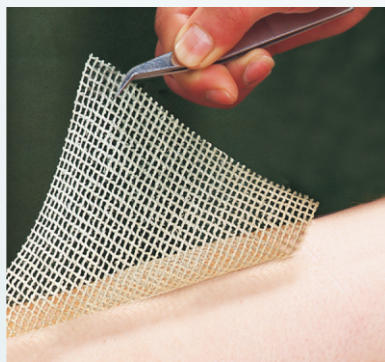

凡士林纱布片

常用规格

袋装、盒装

袋装：片状规格：单层、4层、8层、12层、16层
5×5/7.5×7.5/10×10/10×40/7.5×10/10×20/10×30
15×20/20×20/2.5×90/2.5×20/1.25×180/7.5×45
7.5×90/7.5×22.5/7.5×40/7.5×20/15×90/12.5×22.5
1.2×110-4P/1.25×200/2×200 (cm)
袋装：棒状规格：
5×200/10×200/15×200/20×200/1×100/2×100
15×100/2.5×460/5×460/1.25×460/0.25×460
1.25×200/2×200/2.5×300/5×300cm
盒装：片状规格：单层、4层、8层、12层、16层、36层
5×5/10×10 (cm)
袋装：折叠状规格：单层、4层、8层、12层、16层、36层
5×700/10×700/2.5×460/5×460/1.25×460
0.25×460/1.25×200/2×200/2.5×300/5×300cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

凡士林纱布由脱脂纱布和医用凡士林制成。无菌，一次性使用。



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知

使用方法

- 1、处理伤口前请先洗净双手；
- 2、轻轻地弄干伤口和周围的皮肤；
- 3、除去独立包装袋；
- 4、掀起两边的隔离纸注：多余的油脂会附于隔离纸上；
- 5、轻轻地把凡士林纱布片敷于伤口上；
- 6、如有需要，覆盖吸水垫贴在凡士林纱布片上；
- 7、用胶布或绷带来固定纱布。

适用范围


本产品适用于创面保护及填塞、引流。

注意事项

- 1、如遇严重伤口、灼伤或因伤口而导致不适请尽快到医院就诊；
- 2、包装破损，请勿使用；
- 3、一次性使用产品，用后销毁；
- 4、如遇伤口感染，请尽快到医院就诊；
- 5、对本产品中所含凡士林、石蜡等物质过敏者禁用。
- 6、保质期:24个月。



Recommend Products

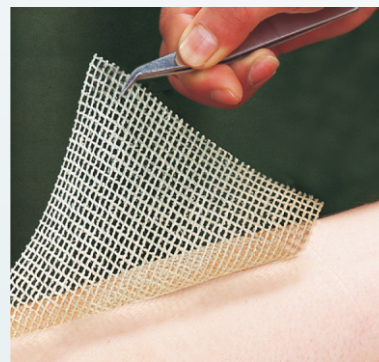

Vaseline Gauze

Specifications

Bagged - flake-shaped product specification

Single-layer, 4-layer, 8-layer, 12-layer, and 16-layer
5×5/7.5×7.5/10×10/10×40/7.5×10/10×20/10×30/15×20/20×20
2.5×90/2.5×20/1.25×180/7.5×45/7.5×90/7.5×22.5/7.5×40/7.5×20
15×90/12.5×22.5/1.2×110-4P/1.25×200/2×200 (cm)

Bagged - rod-shaped product specification

5×200/10×200/15×200/20×200/1×100/2×100/15×100/2.5×460
5×460/1.25×460/0.25×460/1.25×200/2×200/2.5×300/5×300 (cm)

Boxed - flake-shaped product specification:

Single-layer, 4-layer, 8-layer, 12-layer, 16-layer, and 36-layer
5×5/10×10 (cm)

Bagged - folded product specification:

Single-layer, 4-layer, 8-layer, 12-layer, 16-layer, and 36-layer
5×700/10×700/2.5×460/5×460/1.25×460/0.25×460/1.25×200/2×200/
2.5×300 / 5×300 (cm)

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Application Scope

This product is applicable to protection, packing and drainage for wound surfaces.

Application Method

1. Please wash your hands before wound disposal.
2. Gently dry the wound and its surrounding skin.
3. Remove the independent packaging bag.
4. Take off the isolation paper on both sides.
Note: Redundant grease is on the isolation paper.
5. Gently put the Vaseline gauze on the wound.
6. If needed, cover the Vaseline gauze swab with the absorbent pad.
7. Fix the gauze with the adhesive tape or bandage.

Attentions

1. In case of serious wound, burn or discomfort arisen from wounds, please immediately go to hospital for treatment.
2. If the packaging bag is damaged, please do not use the product.
3. This product is disposable.
4. In case of wound infection, please immediately go to hospital for treatment.
5. valid Period: 2 years.



This product is based on the actual product. If there is any change, it will not be notified.



推荐产品



沸石粘胶绷带—专利产品

常用规格

7.5*270cm, 10*270cm, 12.5*270cm, 15*270cm,
20*270cm 30*270cm, 7.5*360cm, 10*360cm,
12.5*360cm, 15*360cm 20*360cm, 30*360cm,
7.5*460cm, 10*460cm, 12.5*460cm 15*460cm,
20*460cm, 30*460cm.

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

沸石粘胶绷带采用优质洁白的天然沸石粉、硫酸钙固化剂和无毒的胶质材料、优质、清洁的纱布制成。



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知

使用方法

- 1、浸渍：将一卷产品倾斜45度浸渍入常温水中涉取水分子，直至没有连续气泡产生；
- 2、挤压：取出产品，用双手从产品的两端向中间挤压，沥去多余的水分；
- 3、卷绕：将产品均匀的卷绕在患处一般缠绕5-8层为宜；
- 4、平整：在包扎手术时，应边包扎边用手塑形、平整。

适用范围

适用于矫形、骨折固定。

注意事项

- 1、浸渍时，水温一般在20℃-30℃，浸渍时间约在5-15秒；
- 2、一卷产品的卷绕塑形过程须在其固化时间内完成；
- 3、如遇包装物破损或漏气，请勿使用；
- 4、一次性使用，用后销毁；
- 5、保质期：24个月；
- 6、发明专利号：ZL20111003.1387.3



Recommend Products



Zeolite bone Bandage —Patent product

Specifications

7.5*270cm, 10*270cm, 12.5*270cm, 15*270cm, 20*270cm
30*270cm, 7.5*360cm, 10*360cm, 12.5*360cm, 15*360cm
20*360cm, 30*360cm, 7.5*460cm, 10*460cm, 12.5*460cm
15*460cm, 20*460cm, 30*460cm.

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Product Description

The zeolite adhesive bandage is made of high-quality pure white natural zeolite powder, calcium sulphate curing agent, non-toxic adhesive material, and high-quality & clean gauze.

Application scope

Used for fixation of fracture. Suitable for patients who need to be orthopedic.

Application Method

1. Dipping: At an inclined angle of 45 degrees, dip one roll of products into the water with room temperature, to sip water, until there are no continuous bubbles.
2. Squeezing: Take out the product, and use both hands to squeeze the product from both ends to the middle, to remove the excess water.
3. Wrapping: Evenly wrap the product around the affected area. Generally, it is suitable to wrap the product for 5-8 layers.
4. Flattening: Within 3 minutes, complete the product shaping and flattening by hand at the time of enswathing, if enswathing is carried out during surgery.

Attentions

1. This product need to be dipping in the water of 20℃-30℃ about to 5-10 seconds.
2. The wrapping process on one roll of products shall be completed before the curing
3. This product is not in direct contact with the wound.
4. This product is disposable, and it shall be destroyed after being used.
5. Valid Period: 24 months
6. Patent NO: ZL20111003.1387.3



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知



推荐产品



弹性绷带 (平纹/皱纹)

常用规格

5 × 270cm, 7.5 × 270cm, 10 × 270cm, 12.5 × 270cm,
15 × 270cm, 20 × 270cm, 30 × 270cm, 5 × 400cm,
7.5 × 400cm, 10 × 400cm, 12.5 × 400cm, 15 × 400cm,
20 × 400cm, 30 × 400cm, 5 × 450cm, 7.5 × 450cm,
10 × 450cm, 12.5 × 450cm, 15 × 450cm, 20 × 450cm,
30 × 450cm, 5 × 500cm, 7.5 × 500cm, 10 × 500cm,
12.5 × 500cm, 15 × 500cm, 20 × 500cm, 30 × 500cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

带状或筒状, 分为弹性或非弹性材料,
不与创面直接接触。



本产品以实物为准, 如有更改, 恕不另行通知

使用方法

将绷带包装打开, 缠绕在患部, 松紧长短适中, 感觉舒适即可。

适用范围

用于对创面敷料或肢体提供束缚力, 以起到包扎、固定作用。

注意事项

1. 该产品未经灭菌处理;
2. 一次性使用, 用后销毁;
3. 有发现霉变的请勿使用。
4. 保质期: 24个月。

Recommend Products



Elastic Bandage (plain/crepe)

Specification

5×270cm, 7.5×270cm, 10×270cm, 12.5×270cm, 15×270cm,
20×270cm, 30×270cm, 5×400cm, 7.5×400cm, 10×400cm,
12.5×400cm, 15×400cm, 20×400cm, 30×400cm, 5×450cm,
7.5×450cm, 10×450cm, 12.5×450cm, 15×450cm, 20×450cm,
30×450cm, 5×500cm, 7.5×500cm, 10×500cm, 12.5×500cm,
15×500cm, 20×500cm, 30×500cm

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders.)

Product Description

Strip-type or tubular-type, made of elastic or non-elastic materials, not in direct contact with the wound surface.

Application Scope

Used to provide the binding force for wound dressings or limbs and trunks, so as to achieve the purpose of enswathing and fixation.

Application Method

Unpack and take out the product, wrap it around the affected area. The degree of tightness and length shall make the patient feel comfortable.

Attentions

1. This product is not sterilized.
2. This product is disposable, and it shall be destroyed after being used.
3. Please do not use the moldy product.



This product is based on the actual product. If there is any change, it will not be notified.



推荐产品



自粘绷带 (无纺布/全棉)

常用规格

5x400cm, 7.5x400cm, 10x400cm, 15x400cm,
2.5x450cm, 5x450cm, 7.5x450cm, 10x450cm,
15x450cm, 20x450cm, 5x270cm, 7.5x270cm,
10x270cm, 15x270cm, 5x500cm, 7.5x500cm,
10x500cm, 15x500cm, 20x500cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

使用方法

- 1、开启:因产品属于自粘性产品,在开启拆包前应确保产品包装的无破损、无漏气;
- 2、包扎: 1)对胳膊肘的保护作用:先将手臂轻靠拢肩90°把绷带从手腕的内侧沿胳膊肘一直贴到肩部;然后弯曲胳膊肘,抬起手腕,将绷带从上手腕内侧开始贴,伸直胳膊肘在手腕骨肌上贴;
- 3、对手腕穴位伸缩的使用:先将胶带剪成段,嵌入手指缝,再将一根从手背开始贴到手腕,最后另一根从伸展的手掌开始贴到手腕。

适用范围

用于对创面敷料或肢体提供束缚力,以及起到包扎、固定作用。

注意事项

- 1、该产品未经灭菌处理;
- 2、一次性使用,用后销毁;
- 3、保质期:24个月。

产品介绍

绷带的基布由无纺布和弹力丝材料组合制成。绷带的粘胶层由压敏胶或热熔胶无毒卫生材料组合而成。分为弹性或非弹性材料,不与创面直接接触。



本产品以实物为准,如有更改,恕不另行通知

Recommend Products



Self-Adhesive Bandage

Specification

5x400cm, 7.5x400cm, 10x400cm, 15x400cm,
2.5x450cm, 5x450cm, 7.5x450cm, 10x450cm,
15x450cm, 20x450cm, 5x270cm, 7.5x270cm,
10x270cm, 15x270cm, 20x270, 5x500cm,
7.5x500cm, 10x500cm, 15x500cm, 20x500cm

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Product Description

The base fabric of the bandage is made of a combination of a nonwoven fabric and a stretch yarn material. The adhesive layer of the bandage is composed of a pressure-sensitive adhesive or a hot-melt adhesive non-toxic sanitary material. This product contains elastic or non-elastic materials, and it should not in direct contact with the wound surface.

Application Scope

Used to provide the binding force for wound dressings or limbs and trunks, so as to achieve the purpose of enswathing and fixation.

Application Method

1. Unpacking: due to the feature of product: it should not be damaged or leaked before open it.
2. Enswathing: Used for protection for elbows:
 - (1) gently make the arm close to the shoulder and form an angle of 90° paste the bandage along the elbow from the inner side of the wrist to the shoulder.
 - (2) Bend the elbow, lift the wrist, and start to paste the bandage from the inner side of the upper wrist; stretch out the elbow, and then paste the bandage on the skeletal muscle of the wrist.
3. Used for stretch of wrist acupoint:
 - (1) Cut the adhesive tape into segments and embed them into the gap between fingers.
 - (2) One is attached to the wrist from the back of the hand.
 - (3) The other is attached to the wrist from the outstretched palm.
 - (4) In order to avoid that the wrist is oppressed, please wind once again.



This product is based on the actual product, if there is any change, it will not be notified.

Attentions

This product is not sterilized; This product is disposable, and it shall be destroyed after being used.



推荐产品



石膏衬垫 (全棉/化纤/竹纤维)

常用规格

5 × 270cm, 7.5 × 270cm, 10 × 270cm, 15 × 270cm,
10 × 300cm, 15 × 300cm, 10 × 450cm, 20 × 270cm,
5 × 360cm, 7.5 × 360cm, 10 × 360cm, 15 × 360cm,
20 × 360cm, 4 × 300cm, 6 × 300cm, 8 × 300cm,
20 × 300cm, 10 × 200cm, 5 × 450cm, 7.5 × 450cm,
15 × 450cm, 20 × 450cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

使用方法

1. 打开自封袋, 取出衬垫;
2. 均匀缠绕在患部;
3. 将衬垫扯断, 抚平;

适用范围

对病人提供一般性防护, 以免受其他器械或外界的伤害。

注意事项

1. 在缠绕石膏衬垫时, 不得用力过大, 以免扯破或拉断;
2. 该产品未经灭菌处理;
3. 一次性使用, 用后销毁。
4. 保质期: 24个月。

产品介绍

病人在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。



本产品以实物为准, 如有更改, 恕不另行通知

Recommend Products



Cast Padding

(Whole cotton / chemical fiber / bamboo fiber)

Specification

5 × 270cm, 7.5 × 270cm, 10 × 270cm, 15 × 270cm,
10 × 300cm, 15 × 300cm, 10 × 450cm, 20 × 270cm,
5 × 360cm, 7.5 × 360cm, 10 × 360cm, 15 × 360cm,
20 × 360cm, 4 × 300cm, 6 × 300cm, 8 × 300cm,
20 × 300cm, 10 × 200cm, 5 × 450cm, 7.5 × 450cm,
15 × 450cm, 20 × 450cm

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Application Scope

General protection for patients, so as to avoid the injury arisen from other devices or external factors.

Application Method

1. Unpack the self-sealing bag, and take out the cast padding.
2. Evenly wrap it around the affected area.
3. Pull apart the padding, and keep the surface flat.

Attentions

1. When enwinding the cast padding, please do not use too much force, so as to avoid tearing or breakage.
2. This product is not sterilized.
3. This product is disposable, and it shall be destroyed after being used.

Production Description


General protective article or material for patients during treatment.



This product is based on the actual product. If there is any change, it will not be notified.



推荐产品

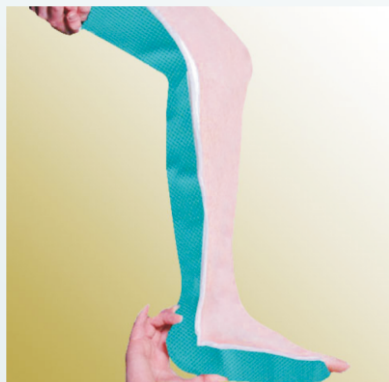

医用高分子夹板

常用规格

7.5x30cm, 7.5x90cm, 10x40cm, 10x50cm,
10x75cm, 12.5x76cm, 12.5x115cm, 15x75cm,
15x115cm, 10x38cm, 10x76cm, 12.5x76cm,
12.5x114cm, 7.5x88cm, 12.5x114cm, 15x76cm,
15x114cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

骨科创伤手术配套医用产品。



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知

使用方法

- 1、为了保护手术操作者在操作过程中不被胶液所染请在操作前务必戴上护理手套；
- 2、根据患者患部的要求，选择合适手术规格和数量的本产品，并在使用中逐一地打开包装；
- 3、将本产品按使用需要，在使用前，取出开封后的产品，手持夹板，放入20-45℃ (68-75°F) 水温的水中3-10秒钟左右，直至水份完全浸渍；
- 4、从水中取出浸渍好的产品，两手持夹板，稍加用力，挤除产品中所含的多余的水量；
- 5、将浸渍挤干的本品，放在患者的患部，在3-8分钟内及时做好产品的塑形；
- 6、取一卷或数卷纱布绷带或棉套护垫，按一定的顺序和方向，依次往复的缠绕在夹板上，固定夹板的位置

适用范围


用于骨折外固定。

注意事项

- 1、本品具有与空气接触将逐步固化的特征，因此，凡天封后未用的、包装漏气的、因保管不慎造成包装破损的、保质期过期的产品，均不得再次使用；
- 2、在本品使用前，操作者须戴上防护手套，以防胶液粘连；
- 3、该产品不与伤口直接接触；
- 4、一次性使用，用后销毁；
- 5、保质期:24个月。



Recommend Products

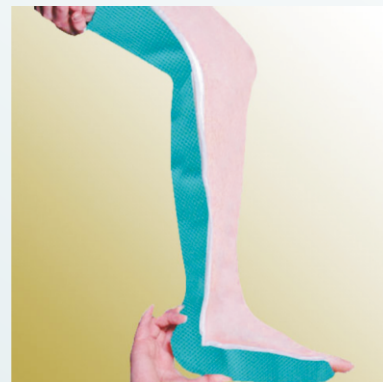

Polymer Splint—fiber Glass

Specification

7.5x30cm, 7.5x90cm, 10x40cm, 10x50cm,
10x75cm, 12.5x76cm, 12.5x115cm, 15x75cm,
15x115cm, 10x38cm, 10x76cm, 12.5x76cm,
12.5x114cm, 7.5x88cm, 12.5x114cm, 15x76cm,
15x114cm

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Production Description

Supporting tool for orthopedic trauma surgery.

Application Scope

Used for external fixation of fracture.

Application Method

1. The operator should wear gloves before the operation to avoid contamination of hands by glue.
2. Select appropriate specification and quantity of the product based on the actual needs of the wound of the patient, and unpack the product one by one during operation.
3. According to use needs, before use, take out the unpacked product, hold the splint by hand, and then immerse it into the water with temperature of 20-45℃ (68-75°F) for 3-10 seconds until the product is fully soaked.
4. Take out the product from the water, hold the splint with both hands, slightly use more force, and squeeze out the excess water in the product.
5. Put the soaked and dried product on the patient's wound; shape the product within 3-8 minutes.
6. Fetch one roll or several rolls of gauze bandage or cotton pad; enwind them onto the splint in a certain sequence and direction, in order to fix the



This product is based on the actual product. If there is any change, it will not be notified.

Attentions

1. As the product is subject to gradually curing in contact with air, please do not use the product that remains unused after unpacking, has leaks in package, has damaged package due to inappropriate storage or is expired in shelf-life.
2. Operators must put on protective gloves before the use of the product to avoid adhesion of the glue to hands.
3. This product is not in direct contact with the wound.
4. This product is disposable.
5. Valid period: 2 years



推荐产品



使用方法

- 1、为了保护手术操作者在操作过程中不被胶液所染，请在操作前务必戴上护理手套；
- 2、根据患者患部的要求，选择合适手术规格和本产品的数量，并在使用中逐一地打开包装；
- 3、将本产品按需要使用，在使用前，取出开封后的产品，手持产品，放入20-45℃(68-75°F)水温的水中3-10秒钟左右直至水份完全浸渍；
- 4、从水中取出浸渍好的产品，两手持产品，稍加用力，挤出产品中所含的多余的水量；
- 5、将浸渍挤干的本品，放在患者的患部，在3-8分钟内及时做好产品的塑形；
- 6、取一卷或数卷纱布绷带或棉套护垫，按一定的顺序和方向，依次往复的缠绕在夹板上，固定夹板的位置。

适用范围

用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用

注意事项

- 1、本品具有与空气接触将逐步固化的特征，因此，凡天封后未用的、包装漏气的、因保管不慎造成包装破损的、保质期过期的产品，均不得再次使用；
- 2、在本品使用前，操作者须戴上防护手套，以防胶液粘连；
- 3、该产品不与伤口直接接触；
- 4、一次性使用，用后销毁；
- 5、保质期:24个月。

玻璃纤维绷带

常用规格

5×185cm, 7.5×185cm, 10×40cm, 10×185cm, 12.5×185cm,
7.5×275cm, 5×275cm, 12.5×275cm, 15×275cm, 5×365cm,
7.5×365cm, 10×365cm, 12.5×365cm, 15×365cm, 7.5×360cm,
10×360cm, 12.5×360cm, 15×360cm, 5×270cm,
7.5×270cm, 10×270cm, 12.5×270cm, 15×270cm, 5×300cm,
7.5×300cm, 10×300cm, 15×300cm, 5×450cm, 7.5×450cm,
10×450cm, 15×450cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知

Recommend Products



Polymer Bandage -Fiber glass

Specification

5×185cm, 7.5×185cm, 10×40cm, 10×185cm, 12.5×185cm,
7.5×275cm, 5×275cm, 12.5×275cm, 15×275cm, 5×365cm,
7.5×365cm, 10×365cm, 12.5×365cm, 15×365cm, 7.5×360cm,
10×360cm, 12.5×360cm, 15×360cm, 5×270cm,
7.5×270cm, 10×270cm, 12.5×270cm, 15×270cm, 5×300cm,
7.5×300cm, 10×300cm, 15×300cm, 5×450cm, 7.5×450cm,
10×450cm, 15×450cm

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Product Description

Strip-type or tubular-type, made of elastic or non-elastic materials, not in direct contact with the wound surface.

Application Scope

Used to provide the binding force for wound dressings or limbs and trunks, so as to achieve the purpose of enswathing and fixation.

Application Method

1. The operator should wear gloves before the operation to avoid contamination of hands by glue.
2. Select appropriate specification and quantity of the product based on the actual needs of the wound of the patient, and unpack the product one by one during operation.
3. According to use needs, before use, take out the unpacked product, hold the splint by hand, and then immerse it into the water with temperature of 20-45℃ (68-75°F) for 3-10 seconds until the product is fully soaked.
4. Take out the product from the water, hold the splint with both hands, slightly use more force, and squeeze out the excess water in the product.
5. Put the soaked and dried product on the patient's wound; shape the product within 3-8 minutes.
6. Fetch one roll or several rolls of gauze bandage or cotton pad; enwind them onto the splint in a certain sequence and direction, in order to fix the position of the splint.

Attentions

1. As the product is subject to gradually curing in contact with air, please do not use the product that remains unused after unpacking, has leaks in package, has damaged package due to inappropriate storage or is expired in shelf-life.
2. Operators must put on protective gloves before the use of the product to avoid adhesion of the glue to hands.
3. This product is not in direct contact with the wound.
4. This product is disposable.
5. Valid period: 2 years



This product is based on the actual product. If there is any change, it will not be notified.



推荐产品



无纺布绷带—弹性无纺布

常用规格

5×450cm, 7.5×450cm, 10×450cm, 12.5×450cm,
15×450cm, 5×360cm, 7.5×360cm, 10×360cm,
12.5×360cm, 15×360cm, 5×300cm, 7.5×300cm,
10×300cm, 12.5×300cm, 15×300cm, 5×200cm,
7.5×200cm, 10×200cm, 12.5×200cm, 15×200cm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

带状或筒状, 分为弹性或非弹性材料, 不与创面直接接触。



本产品以实物为准, 如有更改, 恕不另行通知

使用方法

- 1、讲包装打开, 取出产品;
- 2、将绷带缠绕在患部, 松紧长短适中, 感觉舒适即可。

适用范围

用于对创面敷料或肢体提供束缚力, 防止静脉曲张, 以起到包扎、固定作用。

注意事项

- 1、该产品未经灭菌处理;
- 2、一次性使用, 用后销毁;
- 3、保质期: 24个月。

Recommend Products



Elastic Nonwoven Bandage

Specification:

5×450cm, 7.5×450cm, 10×450cm, 12.5×450cm,
15×450cm, 5×360cm, 7.5×360cm, 10×360cm,
12.5×360cm, 15×360cm, 5×300cm, 7.5×300cm,
10×300cm, 12.5×300cm, 15×300cm, 5×200cm,
7.5×200cm, 10×200cm, 12.5×200cm, 15×200cm

—— (other specifications in accordance with corporate standards or customer orders)

Application Scope

Used to provide the binding force for wound dressings or limbs and trunks, so as to achieve the purpose of enswathing and fixation.

Application Method

1. Unpack, and take out the product.
2. Wrap it around the affected area, The degree of tightness and length shall make the patient feel comfortable.

Attentions

1. This product is not sterilized;
2. This product is disposable, and it shall be destroyed after being used.
3. Valid Period: 2 years

Production Description

Strip-type or tubular-type, made of elastic or non-elastic materials, not in direct contact with the wound surface.



This product is based on the actual product. If there is any change, it will not be notified.



推荐产品



医用胶布 — 护滴专用

常用规格

1.5 × 200cm/卷, 2 × 200cm/卷
2.5 × 200cm/卷, 1.5 × 100cm/卷
2 × 100cm/卷, 2.5 × 100cm/卷

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

医用胶布由无纺布和弹力丝材料粘合而成, 粘胶层有压敏胶或热熔胶等无毒卫生材料组合而成。用于婴幼儿急诊或住院点滴挂水时对输液器具的固定, 防止滑针、脱针等现象, 缓解减轻婴幼儿在输液时不适现象。



本产品以实物为准, 如有更改, 恕不另行通知

使用方法

1. 开启: 因产品属于自粘性产品, 在开启拆包前应确保产品包装的无破损、无漏气;
2. 包扎: 在婴幼儿的输液部位先用输液贴和输液胶带固定, 再用本护滴专用的医用胶布进行固定包扎, 卷绕要松紧适宜, 一般缠绕为2层左右为宜;

适用范围

主要用于婴幼儿在点滴输液时, 对创面敷料或肢体提供束缚力, 以起到包扎、固定作用。

注意事项

- 1、该产品未经灭菌处理;
- 2、一次性使用, 用后销毁;
- 3、有发现霉变的请勿使用。
- 4、保质期: 24个月。



推荐产品



一次性防护口罩

常用规格

三层: 175mm × 95mm

—— (其他规格依照企业标准或客户订单)

产品介绍

产品由口罩面体、鼻夹、口罩带组成, 其中口罩面体由非织造布及过滤层复合而成。

使用方法

打开包装取出口罩, 将浅色面上有鼻夹的一边向上贴在脸部的口鼻处, 并将两边的口罩带分别挂于耳部, 轻按鼻夹使其与鼻梁贴合, 然后用手指按着鼻夹将口罩拉开至下颌处, 整理四周以取得大面积的防护效果。

适用范围

适用于一切对个人需要防护的环境中佩戴, 以及在生活中对人呼吸道进行卫生防护。主要用于阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物, 预防致病菌在环境传播中可能发生的交叉感染。

注意事项

- 1、本品为一次性使用产品, 禁止重复使用;
- 2、使用前请确认产品的有效期, 超有效期不得使用;
- 3、使用前请参阅说明书, 开封后请尽快使用;



本产品以实物为准, 如有更改, 恕不另行通知



推荐产品



使用方法

- 1、口罩的浅色面为内面，深色面为外面。浅色面接触口鼻面部。
- 2、打开包装取出口罩，将浅色面上有鼻夹的一边向上贴在脸部的口鼻处，并将两边的口罩带分别挂于耳部，轻按鼻夹使其与鼻梁贴合，然后用手指按着鼻夹将口罩拉开至下颌处，整理四周以取得大面积的防护效果。
- 3、摘口罩时不要接触口罩前面（污染面）。

适用范围

用于普通环境下的一次性卫生护理。不作外科手术时特殊防护用。

注意事项

- 1、本品为一次性使用产品，禁止重复使用；
- 2、使用前应检查包装完整性，如发现包装破损，严禁使用；
- 3、产品为非无菌提供，不能在有无菌要求的环境下使用；
- 4、产品开封后应尽快使用；
- 5、口罩潮湿后、受到患者血液、体液污染后，应及时更换；
- 6、产品使用后，应按医院或环保部门要求进行处理。

一次性使用医用口罩

常用规格

175mm×100mm、140mm×90mm
175mm×95mm、120mm×85mm

——（其他规格依照企业标准或客户订单）

产品介绍

产品由口罩面体、鼻夹、口罩带组成，为平面耳挂式结构。口罩体材料（PP纺粘无纺布、PP熔喷布，其中内层是无纺布，中间层为熔喷布，外层为无纺布）；鼻夹材料（PE包塑铁丝）；口罩带材料（腈纶）。



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知

推荐产品



网蝶靓肤丰润精华面膜

常用规格

26g、28g

——（其他规格依照企业标准或客户订单）

产品介绍

水、甘油、烟酰胺、羟乙基纤维素、透明质酸钠、尿囊素、羟苯甲酯钠
其他微量成分：柠檬酸、甜叶菊苷、聚丙烯酸钠

使用方法

清洁面部肌肤，撕开膜袋，取其面膜展开，敷贴于面部，一般敷贴时间每片15-25分钟，或根据个人需求时间使用。用后取下面膜，并用指掌轻轻按摩面部，稍后用清水清洗即可。

适用范围

本品不含酒精、激素。富含高保湿补水成分，可滋润干燥肌肤，改善因缺水引起的皮肤干燥、粗糙；使肌肤保持水润饱满，光亮有弹性。

注意事项

- 1、为保持效果及卫生，每片不要重复使用。
- 2、本品为外用面膜，谨防误食，并放置于儿童不易触及的位置。
- 3、使用中若有不适或皮肤发红，应立即停止使用并咨询专业医师。



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知



推荐产品



网蝶焕肤保湿精华液

常用规格

1.5ml、15ml、30ml、
50ml、100ml

——（其他规格依照企业标准或客户订单）

产品介绍

水、甘油、烟酰胺、羟乙基纤维素、透明质酸钠、尿囊素、羟苯甲酯钠

其他微量成分：柠檬酸、甜叶菊苷、聚丙烯酸钠



本产品以实物为准，如有更改，恕不另行通知

使用方法

早晚洁面爽肤后，取适量本品均匀涂抹于面部及颈部，轻轻拍打至吸收。

适用范围

不含酒精、激素。设计多重保湿紧致成分，富含养肤精华，激发肌肤活力，补水充盈，令肤色光泽少瑕有弹性。

注意事项

- 1.为保持效果及卫生，包装显示过期的产品不得使用。
- 2.本品为外用产品，谨防误食，并放置于儿童不易触及的位置。
- 3.使用中若有不适或皮肤发红，应立即停止使用并咨询专业医师。

产品之星

即将上市的新产品

一、医疗器械新产品：

1. 沸石粘胶绷带（专利产品）
2. 弹性无纺布绷带（新产品）
3. 医用胶带—护滴专用（新产品）
4. 医用外科口罩（新产品）

二、消毒杀菌新产品：

1. 胍类消毒湿巾（胍类卫生湿巾）
2. 医用酒精消毒湿巾（75%酒精卫生湿巾）
4. 医用免洗外科手消毒液（复合醇免洗外科手消毒液）
4. 医用免洗外科手消毒凝胶（复合醇免洗外科手消毒凝胶）

本集团通过：

GMP、ISO13485体系认证

欧盟产品CE、美国FDA认证

ISO13485全面质量管理体系认证

